

CHROMEX


FR Coussin chauffant 41564

GB Heating pad 41564

Manuel d'instructions Bon de garantie

Instruction manual
Waranty card



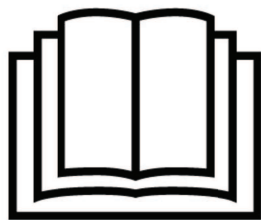

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

A CONSERVER POUR UN USAGE ULTERIEUR

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser votre appareil, particulièrement les instructions de sécurité. Conserver ce manuel pour un usage ultérieur. Si vous devez donner ce produit à un autre utilisateur, il est très important de lui procurer le présent manuel.

Explication des symboles



Ce manuel d'instructions est propre à cet appareil. Il contient des informations importantes sur l'allumage et les différentes fonctions. Lisez ce manuel attentivement. Le non-respect de ces instructions peut causer de graves blessures ou endommager votre appareil.



AVERTISSEMENT

Ces notes d'avertissement doivent être respectées afin de préserver l'utilisateur de toute blessure.



ATTENTION

Ces notes d'avertissement doivent être respectées afin de préserver l'utilisateur de toute blessure.



A NOTER

Ces notes vous procurent les informations complémentaires nécessaires sur l'installation et la mise en fonctionnement.



Ce produit est Classe II



Numéro de lot :




Ne pas planter d'aiguilles ou d'objets pointus dans l'appareil.



Ne pas utiliser le coussin plié ou comprimé.



Pour usage intérieur uniquement.

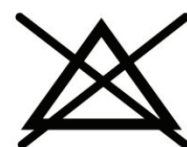

Ne pas utiliser de Chlore.



Ne pas repasser le coussin chauffant.



Ne pas nettoyer à sec.



Ne pas sécher le coussin chauffant au sèche linge.



Vous pouvez laver le coussin chauffant en machine, à 40°C (programme délicat). Veillez à déconnecter l'unité de commande du coussin avant lavage.



1.1

Recommandations de sécurité

Avant chaque utilisation, surveiller attentivement toute apparition de dommage ou d'usure sur le coussin chauffant.

Ne pas l'utiliser si vous remarquez des dommages, des traces d'usure ou tout autre signe de détérioration du coussin, de l'unité de commande ou des câbles. Retourner le à un Centre Service Chromex.

Ne pas plier, ne pas faire de faux plis sur le coussin chauffant pendant son utilisation.

Ne pas percer le coussin, ne pas utiliser d'épingles ou d'autres objets pointus.

Ne pas utiliser par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités mentales, physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.

Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.

Ne pas s'endormir lorsque l'appareil est allumé.

Un usage prolongé à un réglage de température élevé peut provoquer des brûlures de la peau.

Ne pas couvrir le coussin chauffant avec d'autres coussins ou produits chauffants. L'unité de commande ne doit pas être couverte, ni posée sur ou sous le coussin chauffant pendant son utilisation.

Ne pas s'asseoir sur le coussin chauffant pendant son utilisation, positionnez le uniquement autour de la nuque.

Ne jamais toucher l'appareil après qu'il soit tombé dans l'eau.

Débrancher immédiatement la prise d'alimentation.

Tenir le câble d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.

Ne pas tirer les câbles électriques, ni les tourner, ni les tordre fortement.

Ne pas utiliser le câble comme poignée.

Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. Utiliser le dans un environnement sec uniquement (pas dans une salle de bain ou dans un endroit similaire)

L'unité de commande ainsi que les parties conductrices ne doivent être exposées à aucun type d'humidité.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, ne pas chercher à réparer l'appareil soi-même mais le confier à un Centre Agréé Chromex.

Débrancher le cordon d'alimentation dans les cas suivants :

- Avant tout nettoyage
- En cas d'endommagement ou de mauvais fonctionnement.
- En cas de non-utilisation prolongée

Afin d'éviter tout danger en cas d'endommagement du câble d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par un Centre Agréé Chromex. Ne pas ranger l'appareil encore chaud mais le laisser refroidir avant de le plier.

Utiliser uniquement avec l'organe de commande livré avec l'appareil.

1.2

Conseils pour votre santé

Si vous avez des questions concernant les conséquences sur votre santé, consulter votre médecin avant d'utiliser le coussin chauffant.

Ne pas appliquer le coussin chauffant sur des parties du corps enflées, blessées ou enflammées.

Si les douleurs musculaires et articulaires persistent, veuillez consulter votre médecin. Des douleurs persistantes peuvent être symptomatiques de graves maladies.

Si l'utilisation du coussin chauffant est cause de douleurs, arrêter de l'utiliser.

2.1 Article et emballage

Avant utilisation, merci de bien vouloir veiller à ce que votre article soit bien complet et qu'il ne comporte aucun défaut. Si c'est le cas, ne l'utilisez pas mais retournez le à un Centre Agréé Chromex.

Les pièces suivantes doivent être présentes au déballage du produit :

- 1 Coussin chauffant + 1 unité de commande
- 1 manuel d'instruction

La boîte d'emballage peut être réutilisée ou recyclée.

Si vous notez des dommages liés au transport lors du déballage du produit, merci de bien vouloir prendre contact avec votre point de vente.



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter tout risque du suffocation, assurer vous que le sac en plastique est hors de portée des enfants.

2.3 Mise en service

Positionner le coussin autour du cou et fermer la fermeture éclair (fermeture côté cou). Raccorder l'appareil à une source de courant électrique et déplacer l'unité de commande de la position **0** à la position **1**. Le voyant lumineux s'éclaire en rouge. Après quelques minutes, vous pourrez sentir le coussin monter en température. Si vous souhaitez obtenir une température plus élevée, placer l'unité de commande sur la position **2** ou à son maximum, position **3**. Si la température du coussin est trop élevée, repasser à une position inférieure **2** ou **1**.

Après un court instant, la température baissera sensiblement.

Ramener l'unité de commande à la position **0** pour éteindre l'appareil. Le voyant lumineux cessera alors de s'éclairer. Débrancher la prise d'alimentation après utilisation.

Placer l'unité de commande en position **1** avant de vous endormir ou pour un usage prolongé. Après approximativement 1H30 de fonctionnement, le coussin chauffant s'éteindra automatiquement. Pour le rallumer, ramener l'unité de commande à la position **0** puis sélectionner à nouveau un niveau de température **1**, **2** ou **3**.

3.1 Nettoyage et maintenance

Avant de nettoyer le coussin, débrancher le de la prise de courant.
Déconnecter l'unité de commande du coussin en appuyant sur les crans de sécurité et laisser sa température baisser pendant quelques minutes.

Le coussin chauffant peut être nettoyé :

- avec une brosse douce lorsqu'il est sec

- en machine à 40°C (programme doux) - Respecter les instructions indiquées sur l'étiquette - **L'unité de commande ne peut en aucun cas passer en machine.**

Ne jamais utiliser de détergent ou ou de brosse rigide.

Démêler le câble d'alimentation de temps en temps.

Avant de ranger l'appareil, laisser sa température chuter. Le ranger dans un endroit propre et sec, posé à plat et sans rien rajouter par dessus.

3.2 Environnement

Ne jetez pas l'appareil en fin de vie avec les ordures ménagères, mais disposez le dans un point de collecte approprié pour son recyclage. Vous aiderez ainsi à protéger l'environnement.



3.3 Spécifications

Nom du modèle : coussin chauffant 41564

Tension d'utilisation : 220-240 V ~ 50 Hz

Puissance : 100 watts

Arrêt automatique : après 1H30 environ

Niveaux de réglages : 0 - 1 - 2 - 3

Protection classe II :

Conditions d'utilisation : Utiliser uniquement dans des pièces sèches, comme décrit dans le mode de fonctionnement.

Conditions de rangement : Posé à plat, dans un espace propre et sec.

Cet appareil est conforme à la directive 89/336/CEE concernant la compatibilité électromagnétique.

4.1 Conditions de la Garantie

Nos appareils sont garantis pendant **1 an** contre tous vices de fabrication à l'exclusion de toutes autres prétentions, en raison d'une décision syndicale en date du 14 avril 1953. Cette garantie ne s'applique qu'aux organes électriques et ne joue pas en cas d'avaries provenant d'un emploi non conforme aux prescriptions du manuel d'utilisation joint à l'appareil.

Pour les marchandises expédiées, le port aller doit être payé par l'expéditeur, les frais de retour sont couverts par ELECTRO-VELA dans le cas d'un échange ou d'une réparation sous garantie.

Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts de vices cachés, qui s'applique, en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivant du Code Civil.

Votre appareil doit vous donner toute satisfaction.

Cependant il peut se produire comme pour tous les appareils électriques, un incident de fonctionnement.

ELECTRO-VELA

**ZA de l'Oseraie 3, rue Hector Berlioz
72000 Le Mans France
electro-vela@wanadoo.fr**

est chargé du Service Après Vente. En cas de besoin, adressez lui votre appareil complet muni de son cordon d'alimentation, en y ajoutant ce bon de garantie

N'omettez pas de mentionner vos noms et adresse pour le retour.